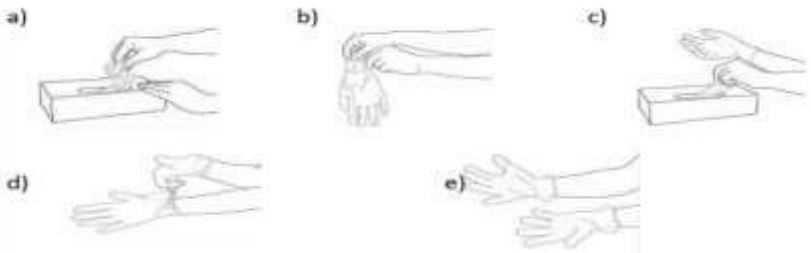



NOMBRE COMERCIAL:	GUANTE HOSPITALARIO ANDINO		
PROCEDENCIA:	MALASIA	MARCA:	ANDINO
LINEA DE ESPECIALIZACIÓN:	USO GENERAL		
REGISTRO SANITARIO:	7023-DME-519		
NIVEL DE RIESGO:	I		
ESTERILIZACIÓN:	NO APLICA		
PRESENTACION:	CAJA x 100 UNIDADES		
MEDIDA:	EXTRA SMALL SMALL MEDIUM LARGE		
VIDA UTIL:	5 AÑOS		
FACTOR DE EMPAQUE:	<ul style="list-style-type: none"> • PRIMARIO: Caja acorde al contenido interno. • CARTON: Material resistente a la estiba, sellado con cinta de embalaje, en buenas condiciones garantiza la integridad del contenido, el transporte y almacenamiento. 		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Guantes no estériles. • Ambidiestro. • Levemente empolvados (polvo de almidón biodegradable) • Hipoalergénicos * • Color blanco cremoso • Con reborde a nivel del puño que facilita la colocación y evita que el guantese enrolle • Descartable • De uso único. • *a excepción de personas alérgicas al látex. <p>Propiedades físicas: Antes del envejecimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resistente a la tracción 18 Mpa 2. Elongación máxima (%) min 650 		

	Después del envejecimiento: <ol style="list-style-type: none"> Resistencia a la tracción 14Mpa (fuerza) Elongación máxima (%) min500 																									
COMPONENTES:	<ul style="list-style-type: none"> Látex Natural Polvo de Almidón <table border="1" data-bbox="528 297 1406 517"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO</th> </tr> <tr> <th>TALLAS</th> <th>XSMALL</th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> <th>LARGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de la palma</td> <td>70-79mm</td> <td>80-89mm</td> <td>90-99mm</td> <td>100-109mm</td> </tr> <tr> <td>Longitud Total</td> <td colspan="4">Min 240mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>4.3 ± 0.2</td> <td>4.6 ± 0.2</td> <td>5.0 ± 0.2</td> <td>5.4 ± 0.2</td> </tr> </tbody> </table>	ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO					TALLAS	XSMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	Ancho de la palma	70-79mm	80-89mm	90-99mm	100-109mm	Longitud Total	Min 240mm				Peso	4.3 ± 0.2	4.6 ± 0.2	5.0 ± 0.2	5.4 ± 0.2
ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO																										
TALLAS	XSMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE																						
Ancho de la palma	70-79mm	80-89mm	90-99mm	100-109mm																						
Longitud Total	Min 240mm																									
Peso	4.3 ± 0.2	4.6 ± 0.2	5.0 ± 0.2	5.4 ± 0.2																						
INDICACIONES/ MANUAL DE USO	<p>INDICACION: Para procedimientos médicos que no requieran condiciones estériles (riesgo biológico medio tales como Extracciones sanguíneas, Retirada de vías periféricas, Manejo de muestras y análisis clínicos, Limpieza de aparataje y material, Manejo de secreciones, fluidos, orina, etc. Otras prácticas sin protocolo de esterilidad, pero que requieran protección.</p> <p>INSTRUCCIONES DE USO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hay que recordar siempre que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Cada proceso debe comenzar con un correcto lavado de manos, con jabón antiséptico, el lavado de manos clínico o corriente es la medida más importante para prevenir la transmisión de infecciones intrahospitalarias. Revisar los guantes antes de usarlos para determinar si existe imperfecciones 																									
ADVERTENCIAS PRECAUCIONES:	<p>Y Antes del uso las uñas deben estar cortas y limpias, debe retirarse todo tipo de joyas, pulseras y anillos.</p> <p>No se debe aplicar fuerza excesiva al colocarse los guantes ya que puede romperlos.</p> <p>Discontinúe el uso si existe irritación continua.</p> <p>Desechar según normas de bioseguridad.</p>																									

	Proteger del calor, luz solar y humedad. Almacenar en un lugar limpio y seco, libre de polvo y lejos de la luz ultravioleta o fluorescente.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	<p>Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa.</p> <p>Almacenar en un lugar fresco y seco.</p> <p>Temperatura homogénea menor a 30°C.</p> <p>Humedad relativa 60%.</p> <p>El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras. Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo.</p> <p>No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.</p> <p>Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.</p> <p>Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.</p> <p>Se recomienda seguir la siguiente señalética, para mejor utilización y preservación del producto:</p>	
		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embalaje debe mantenerse en posición vertical 2. Cantidad de cajas apiladas 3. Frágil 4. No exposición a humedad 5. Bajo protección de sol 6. Temperatura adecuada 	
CERTIFICACIÓN:	NORMA ISO 13485	
CODIGO DE BARRAS:	7862105749078	GUANTE HOSPITALARIO ANDINO XSAMLL
	7862105749085	GUANTE HOSPITALARIO ANDINO SMALL
	7862105749092	GUANTE HOSPITALARIO ANDINO MEDIUM
	7862105749108	GUANTE HOSPITALARIO ANDINO LARGE